



buckingham easywipe user instructions

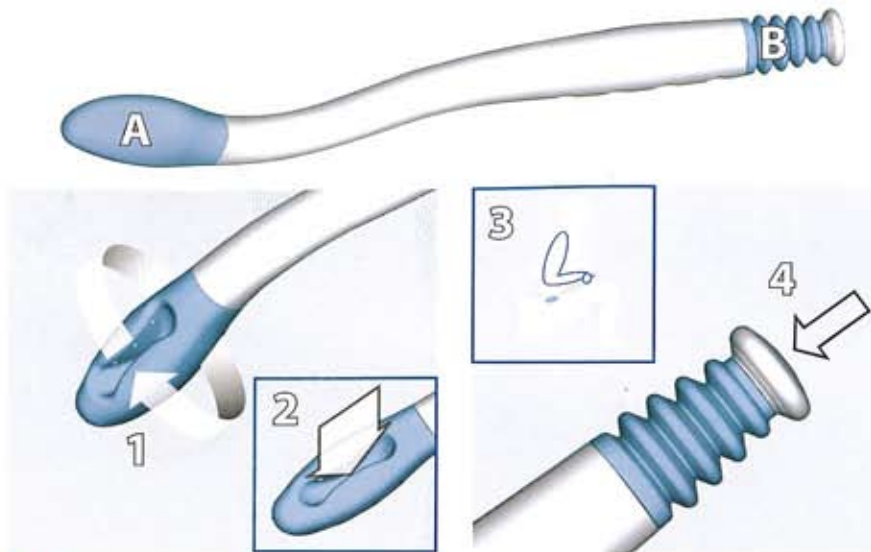

L'easywipe possède une extrémité douce et arrondie en silicone (A) sur laquelle vous pouvez fixer le papier toilette ou la lingette, ainsi qu'un bouton poussoir à l'autre extrémité (B) qui permet de libérer le papier ou la lingette après utilisation. Très simple d'utilisation, vous pouvez l'emporter partout en toute discrétion grâce à la pochette fournie avec. C'est un accessoire léger, solide et facile à nettoyer.

Mode d'emploi

Choisissez la longueur de papier toilette que vous souhaitez, environ 6 feuilles soit 60 cm de long. Pliez le papier en deux. Prenez l'easywipe et coincez une extrémité du papier toilette dans la fente en forme de haricot (1). Placez le papier toilette autour de la tête de l'easywipe, et coincez l'autre extrémité dans la même fente (2). Le papier

 The easywipe has a soft, rounded silicone end (A) to which toilet tissue or wipes are attached and a push button end (B) which releases the tissue or wipe after use. It is simple to use and can be carried discreetly in the travel pouch provided. It is light, sturdy and easy to keep clean.

Instructions for use

Select the length of toilet tissue which should be approximately 6 sheets (60 cms) long. Fold the length of tissue in half. Hold the easywipe and tuck one end of the toilet tissue into the bean shaped recess (1). Wrap the tissue paper around the head of the wiper end and tuck the loose end into the same recess (2). The toilet tissue will be held in place for cleaning.

The easywipe may be used to clean the vaginal and anal area following toileting. It is recommended to be used between the legs, from the front (3) or from behind, whilst seated on the toilet.

The soiled material is ejected by pushing the button at the end of the easywipe and disposed of into the toilet. Repeat the above process as required.

Use a moist wipe or a disposable cloth with mild soapy water to clean the soft end of the easywipe.

Specifications:

The easywipe is ergonomically designed to be comfortable, safe to use and to assist reaching when wiping is difficult. It is latex free.

Please read this:

FOR EXTERNAL USE ONLY.

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY SIGN OF DAMAGE TO THE END MARKED (A) ABOVE. YOU MUST DISCARD THE PRODUCT.

Only to be used for the purposes of external, personal cleansing and wiping.

Do not use in shower or bath.

To maintain personal hygiene the easywipe should not be shared between people.

Not to be used on animals or young children.

Only use the easywipe for the intended purpose.

Cleaning

Do not immerse the easywipe in water.

When cleaning wipe all over with a soft disposable cloth in mild soapy water.

Dry with a soft disposable cloth.

It is recommended that the easywipe is cleaned after each use.

Due to hygiene concerns the product, once removed from the packaging, cannot be returned to us.

toilette est prêt à être utilisé.

L'easywipe peut être utilisé pour nettoyer les zones vaginales et anales après être allé aux toilettes. Il est recommandé de l'utiliser entre les jambes, en commençant par l'avant (3) ou l'arrière, lorsque vous êtes assis sur le siège des toilettes.

Le papier usagé est libéré lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir situé à l'extrémité de l'easywipe, et évacué dans les toilettes. Répétez la procédure ci-dessus si nécessaire.

Utilisez une lingette humide ou un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse pour nettoyer l'extrémité douce de l'easywipe.

Spécifications :

L'easywipe a été conçu de façon ergonomique pour vous assurer un confort, une sécurité lors de l'utilisation et pour faciliter le nettoyage des zones intimes, si vous avez des difficultés à le faire vous-même. Il ne contient pas de latex.

Avertissement :

POUR UTILISATION EXTERNE UNIQUEMENT.

JETER LE PRODUIT EN CAS DE DÉGRADATION OU D'USURE DE L'EXTRÉMITÉ PORTANT LA LETTRE (A) SUR LE DESSUS.

Utiliser ce produit uniquement pour nettoyer les zones intimes externes.

Ne pas utiliser sous la douche ou dans le bain.

Afin de préserver votre hygiène intime, vous ne devez pas laisser d'autres personnes utiliser l'easywipe.

Ne pas utiliser sur des animaux ou des jeunes enfants.

Ne pas utiliser l'easywipe à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu.

Entretien

Ne pas plonger l'easywipe dans l'eau.

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse.

Sécher avec un chiffon sec.

Il est recommandé de nettoyer l'easywipe après chaque utilisation.

Pour des raisons d'hygiène, vous ne pouvez pas nous renvoyer l'accessoire une fois que vous l'avez sorti de son emballage.



a chris clarke designed product

Buckingham Healthcare Buckingham House 108 Baffins Road Portsmouth Hants PO3 6BQ
T 023 92 790 977 F 023 92 719 635 E info@buckinghamhealthcare.co.uk
www.buckinghamhealthcare.co.uk

 **PARSONS**
ADL
1986 SIDEROAD 15, TOTTENHAM, ON L0G 1W0 - www.parsonsadl.com

"Helping people to help themselves"



BUCKINGHAM